



 **airScan**
pro

Doppler couleur | Étanche | Léger



Dramiński airScan pro

Ayez une longueur d'avance sur les autres

Échographe léger, robuste et sans fil destiné pour les vétérinaires bovins et équins.

Enfermé dans un **boîtier en aluminium étanche**, la technologie de pointe offre une **qualité d'image supérieure** ainsi qu'un mode **Doppler en couleur** sensible.

Le clavier ergonomique associé aux **lunettes sans fil iLens** améliore considérablement le flux de travail. Les batteries remplaçables garantissent une quantité suffisante d'énergie pour toute la journée d'échographie.

Données techniques

- Sondes:
Rectales linéaires 4,2-12,5 MHz, portée jusqu'à 19 cm
Rectales convexes 3-7 MHz, portée jusqu'à 30 cm
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 2 h
- Temps de charge d'une batterie: jusqu'à 2 h (5 V 3 A QC, PD)
- Poids : un peu plus de 600 g (1,32 lb) avec une batterie
- Étanche avec indice de protection IP65
- Compatible Compatibilité avec le système Android/iOS sur un portable ou une tablette

airScan
pro



Cœur de fœtus de vache



Fœtus de vache



Ovaire de vache



Utérus de vache



Gestion équine

IMAGES
DIAGNOSTIQUES

Principales caractéristiques

- **Connexion sans fil** avec votre appareil mobile ou vos **lunettes iLens**
- La même application pour nos sondes abdominales sans fil
- Les modes de **Doppler couleur** et puissance permettent d'indiquer les vaches non fécondées au 18^{ème} jour après l'insémination artificielle, par évaluation du flux sanguin CL
- Petit et pratique à monter sur la ceinture solide attachement à la ceinture de hanche. Une solide fixation sur une ceinture/sangle de support
- **Batteries interchangeables remplaçables**
- Chargement via un câble **USB-C** standard à la maison ou dans la voiture
- **Clavier à membrane ergonomique** avec indicateur de la charge de batterie
- Nettoyage et désinfection rapide et facile

Application

	airScan pro rectal LINEAR	airScan pro rectal CONVEX
Reproduction bovine	+	+
Reproduction équine	+	+
Reproduction des petits ruminants		+
Sexage fœtal	+	+
Débit sanguin CL	+	+
Poumons	+	+
État corporel	+	+
Mamelle et trayon	+	
Foie		+
Tractus gastro-intestinal	+	+
Tendon	+	

Mesures

- Grille
- Distance
- Âge d'un fœtus




Application
Dramiński airScan pro
Connectez airScan pro à votre appareil.



Le kit contient

- **airScan pro** avec une sonde rectale linéaire ou rectale convexe intégrée
- Ceinture avec le système de montage rapide
- 2 batteries externes
- Chargeur de batterie
- Mallette de transport
- Manuel d'utilisation (clé USB)

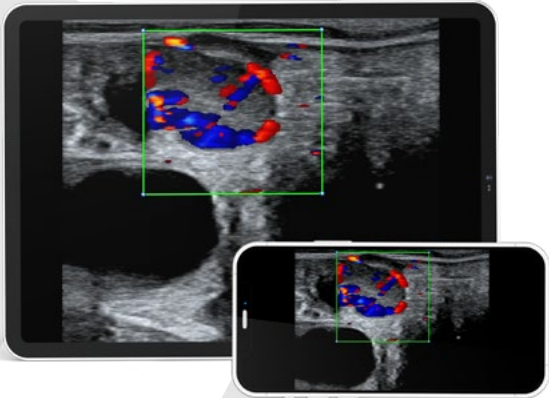

Doppler CL de la vache





VOIR PLUS

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Pologne

 +48 89 675 26 00  ultrasound@draminski.com

Suivez-nous:    

www.draminski.com