



Cœur de foetus de vache




Foetus de vache



Ovaire de vache



Utérus de vache

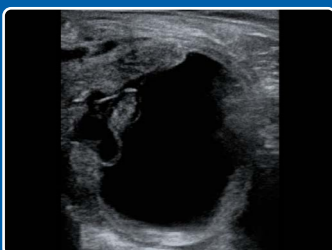

Gestion équine

IMAGES  
DIAGNOSTIQUES



VOIR PLUS

**DRAMINSKI S.A.**

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Pologne

+48 89 675 26 00 @ sales@draminski.com

Suivez-nous:

[www.draminski.fr](http://www.draminski.fr)

v.1987270426FR

**DRAMINSKI**  
TECHNOLOGY

ÉCHOGRAPHE SANS FIL



**airScan**  
**pro**

Doppler couleur | Étanche | Léger

[www.draminski.fr](http://www.draminski.fr)

## Dramiński airScan pro

### Ayez une longueur d'avance sur les autres

Échographe léger, robuste et sans fil destiné pour les vétérinaires bovins et équins.

Enfermé dans un **boîtier en aluminium étanche**, la technologie de pointe offre une **qualité d'image supérieure** ainsi qu'un mode **Doppler en couleur** sensible.

Le clavier ergonomique associé aux **lunettes sans fil iLens** améliore considérablement le flux de travail. Les batteries remplaçables garantissent une quantité suffisante d'énergie pour toute la journée d'échographie.

### Données techniques

- **Sondes** (Sondes FIXES!):  
Rectales linéaires 4,2-12,5 MHz, portée jusqu'à 19 cm  
Rectales convexes 3,0-7,0 MHz, portée jusqu'à 30 cm
- **Autonomie de la batterie:**  
Jusqu'à 2 h - batterie standard  
Jusqu'à 4 h - Power Battery
- **Temps de charge de la batterie** (5V 3A QC, PD):  
Jusqu'à 2 h - batterie standard  
Jusqu'à 4 h - Power Battery
- **Poids** (avec sonde et batterie):  
Environ 0,62 kg - batterie standard  
Environ 0,72 kg - Power Battery
- Étanche avec indice de protection IP65
- Compatible Compatibilité avec le système Android/iOS sur un portable ou une tablette

**airScan**  
pro

### Principales caractéristiques

- **Connexion sans fil** avec votre appareil mobile ou vos **lunettes iLens**
- La même application pour nos sondes abdominales sans fil
- Les modes de **Doppler couleur** et puissance permettent d'indiquer les vaches non fécondées au 18<sup>ème</sup> jour après l'insémination artificielle, par évaluation du flux sanguin CL
- Petit et pratique à monter sur la ceinture solide attachement à la ceinture de hanche. Une solide fixation sur une ceinture/sangle de support
- **Batteries interchangeables remplaçables**
- Chargement via un câble **USB-C** standard à la maison ou dans la voiture
- **Clavier à membrane ergonomique** avec indicateur de la charge de batterie
- Nettoyage et désinfection rapide et facile

### Application

	airScan pro rectal LINEAR	airScan pro rectal CONVEX
Reproduction bovine	+	+
Reproduction équine	+	+
Reproduction des petits ruminants		+
Sexage foetal	+	+
Débit sanguin CL	+	+
Poumons	+	+
État corporel	+	+
Mamelle et trayon	+	
Foie		+
Tractus gastro-intestinal	+	+
Tendon	+	

### Mesures

- Grille
- Distance
- Âge d'un foetus



**Application Dramiński airScan pro**  
Connectez airScan pro à votre appareil.




DISPONIBLE SUR  
Google Play



Télécharger dans  
l'App Store

### Le kit contient

- **airScan pro** avec une sonde rectale linéaire ou rectale convexe intégrée
- Ceinture avec le système de montage rapide
- 2 batteries externes
- Chargeur de batterie
- Mallette de transport
- Manuel d'utilisation (clé USB)

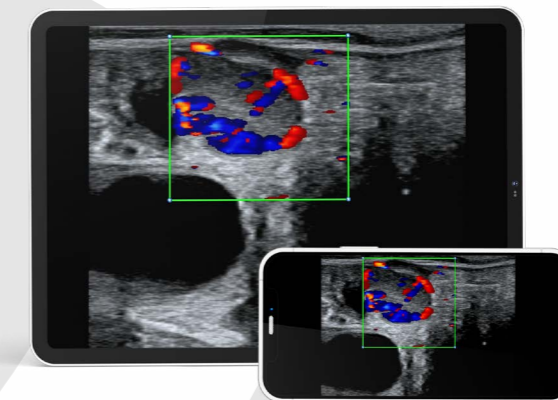

Doppler CL de la vache

